


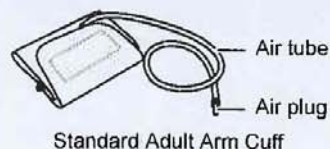
# OMRON®

Thank you for purchasing the OMRON® H-CR24 Arm Cuff. This arm cuff is intended for use with OMRON blood pressure monitors designed to be used with a D-ring Cuff. The H-CR24 D-ring Cuff fits an arm circumference range of 9" to 13" (22cm to 32cm).

 Refer to the instruction manual provided with the blood pressure monitor for complete instructions on operating the device.


## INSTRUCTIONS FOR USE

1. Two air plugs are included with this arm cuff.  
Select the air plug that matches the air plug on the original cuff that was included with the purchase of the OMRON blood pressure monitor.
2. Insert the matching air plug securely into the end of the air tube on the new cuff.
3. Remove the old cuff from the blood pressure monitor and discard.
4. Connect the new cuff to the unit by inserting the air plug into the air jack on the unit.



## HOW TO APPLY THE ARM CUFF

1. Make sure the air plug is securely inserted into the blood pressure monitor.
2. Remove tight-fitting clothing from your upper left arm.
3. Apply the cuff to your upper left arm so the arrow is centered on the inside of your arm and aligned with your middle finger. The air tube runs down the inside of your arm. The bottom of the cuff should be approximately 1/2" above your elbow.
4. Wrap the cuff firmly in place around your arm using the cloth fastening.

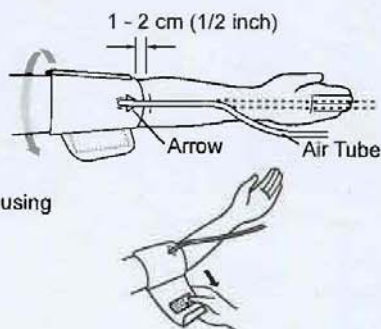

Toll-Free Customer Service  
1-800-634-4350


Manufactured for: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.  
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN  
Distributed by: OMRON HEALTHCARE, INC.  
1925 West Field Court, Lake Forest, IL 60045 U.S.A.

www.omronhealthcare.com  
© 2013 OMRON HEALTHCARE, INC.

Made in China  
1886940-8A


# OMRON®

Merci d'avoir acheté le brassard OMRON® H-CR24. Ce brassard est destiné à être utilisé avec les tensiomètres OMRON conçus pour être utilisés avec un brassard à anneau en D. Le brassard à anneau en D H-CR24 s'adapte aux bras de 22 à 32 cm (9 à 13 po) de circonférence.

 Consultez le guide de l'utilisateur fourni avec le tensiomètre pour des directives détaillées sur l'utilisation de l'appareil.


## MODE D'EMPLOI

1. Deux raccords d'air sont fournis avec ce brassard.  
Sélectionnez le raccord d'air qui est identique au raccord d'air qui était fourni avec le brassard d'origine du tensiomètre OMRON.
2. Insérez solidement le raccord d'air correspondant dans l'extrémité du tube à air du nouveau brassard.
3. Déconnectez l'ancien brassard du tensiomètre et mettez-le au rebut.
4. Reliez le nouveau brassard au tensiomètre en insérant solidement le raccord d'air dans la prise d'air de l'appareil.

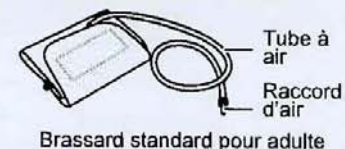

## INSTALLATION DU BRASSARD

1. Assurez-vous que le raccord d'air est solidement fixé dans le tensiomètre.
2. Retirez tout vêtement serré de la partie supérieure du bras gauche.
3. Installez le brassard sur la partie supérieure du bras gauche de sorte que la flèche soit centrée à l'intérieur du bras et alignée avec le majeur. Le tube d'air doit descendre à l'intérieur du bras.
4. La partie inférieure du brassard doit être à environ 1 à 2 cm (1/2 pouce) au-dessus de votre coude.

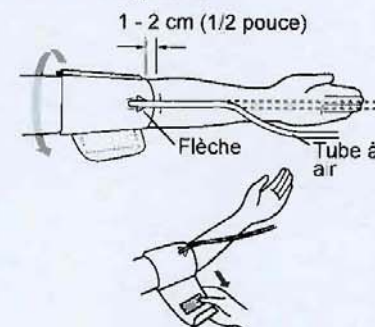

Ligne d'assistance sans frais  
1-800-634-4350


Fabriqué pour: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.  
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN  
Distribué par: OMRON HEALTHCARE, INC.  
1925 West Field Court, Lake Forest, IL 60045 U.S.A.

www.omronhealthcare.com  
© 2013 OMRON HEALTHCARE, INC.

Fabriqué en Chine




Gracias por adquirir el Brazaletе OMRON® H-CR24. Este brazaletе está destinado para ser utilizado con monitores de presión arterial OMRON diseñados para uso con un anillo en D. El Brazaletе H-CR24 con anillo en D se adapta a un contorno de brazo de 9" a 13" (22cm a 32cm).

 Consulte el manual de instrucciones suministrado con el monitor de presión arterial para instrucciones completas sobre el funcionamiento del dispositivo.

## INSTRUCCIONES DE USO


1. Con este brazaletе, se incluyen dos enchufes machos del aire. Seleccione el enchufe macho del aire que corresponda al proporcionado con el brazaletе original que fue incluido con la compra del monitor de presión arterial OMRON.
2. Introduzca el enchufe macho del aire de manera segura en el extremo del tubo de aire del brazaletе nuevo.
3. Retire y deseche el brazaletе viejo del monitor de presión arterial.
4. Conecte el brazaletе nuevo a la unidad introduciendo el enchufe macho del aire en el enchufe hembra de la unidad.

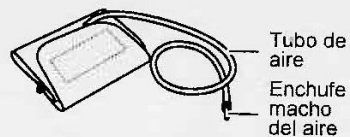

Brazaletе estándar para brazo adulto

## CÓMO COLOCAR EL BRAZALETE

1. Asegúrese de que el enchufe macho del aire esté correctamente insertado en el monitor de presión arterial.
2. Retire cualquier prenda ajustada de la parte superior de su brazo izquierdo.
3. Coloque el brazaletе en la parte superior del brazo izquierdo de modo que la flecha quede centrada en la parte interna del brazo y alineada con el dedo medio. El tubo de aire baja por la parte interna del brazo. La parte inferior del brazaletе debe quedar aproximadamente a 1/2" (1 - 2 cm) por encima del codo.
4. Coloque el brazaletе de modo que quede bien envuelto alrededor del brazo usando el sujetador de tela.

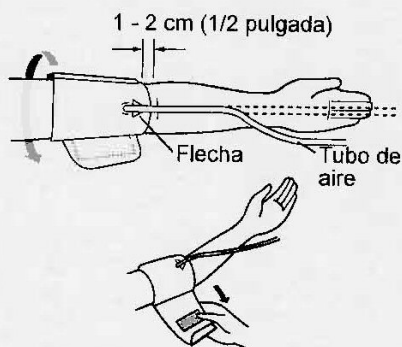

Servicio de Atención al Cliente gratuito  
1-800-634-4350

Fabricado para: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.  
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN  
Distribuido por: OMRON HEALTHCARE, INC.  
1925 West Field Court, Lake Forest, IL 60045 U.S.A.

[www.omronhealthcare.com](http://www.omronhealthcare.com)

© 2013 OMRON HEALTHCARE, INC.

Hecho en China