


# OMRON®

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

### AC Adapter for Omron® Digital Blood Pressure Monitor Model HEM-ADPTW5



Thank you for purchasing the Omron® HEM-ADPTW5 AC Adapter.

 Please read this instruction manual thoroughly before using the unit.

Please keep for future reference.


#### -DANGER-

#### TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

-  For connection to a power supply not in the U.S.A, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet.
-  The power unit (AC Adapter) is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.

#### TO CONNECT THE AC ADAPTER

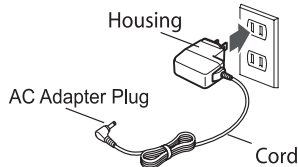

- Insert the AC Adapter Plug into the AC Adapter Jack on the monitor.
- Plug the AC Adapter into a 120V AC outlet (60 cycles).



#### TO DISCONNECT THE AC ADAPTER

- Hold and pull the Housing to remove the AC Adapter from the electrical outlet. Do not remove by pulling the cord.
- Remove the AC Adapter plug from the monitor.

#### WARNING

-  Do not plug or unplug the power cord into the electrical outlet with wet hands.
-  Do not overload power outlets. Plug the device into the appropriate voltage outlet.

Manufactured for :  
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.  
53 Kunotsubo, Terado-cho,  
Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN

Distributed by :  
OMRON HEALTHCARE, INC.  
1925 West Field Court,  
Lake Forest, IL 60045 U.S.A.

Made in Philippines


5322559-9B

# OMRON®

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### Adaptador de CA para el Monitor de presión arterial digital de Omron® Modelo HEM-ADPTW5



Gracias por comprar el Adaptador de CA HEM-ADPTW5 de Omron®.

 Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar la unidad.

Consérvelo para futura referencia.


#### - PELIGRO -

#### PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

-  Para conexiones a un suministro que no sea en los EE. UU., utilice un adaptador de ficha conectora con la configuración apropiada para el tomacorriente.
-  La unidad de potencia (adaptador de CA) está diseñada para estar correctamente orientada en posición vertical o montada en el suelo.

#### PARA CONECTAR EL ADAPTADOR DE CA

- Introduzca el enchufe macho del adaptador de CA en el enchufe hembra del adaptador de CA del monitor.

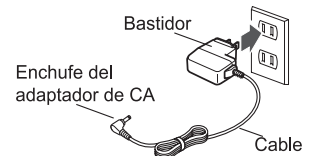



- Enchufe el adaptador de CA a un tomacorrientes de 120 V CA (60 ciclos).

#### PARA DESCONECTAR EL ADAPTADOR DE CA

- Retire el enchufe del adaptador de CA del monitor.
- Sostenga el bastidor para retirar el adaptador de CA del tomacorrientes.

#### ADVERTENCIA

-  No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente con las manos mojadas.
-  No sobrecargue los tomacorrientes. Enchufe el dispositivo en un tomacorrientes con el voltaje adecuado.

Fabricado para:  
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.  
53 Kunotsubo, Terado-cho,  
Muko, Kyoto, 617-0002 JAPÓN

Distribuido por:  
OMRON HEALTHCARE, INC.  
1925 West Field Court,  
Lake Forest, IL 60045 U.S.A.

Hecho en Filipinas



## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVEZ CES DIRECTIVES



### Adaptateur c.a. pour tensiomètre numérique Omron® Modèle HEM-ADPTW5

Merci d'avoir acheté l'adaptateur c.a. Omron® HEM-ADPTW5.

 Veuillez lire ce guide de l'utilisateur attentivement avant d'utiliser l'appareil.


Veuillez le garder à des fins de référence.

### **-DANGER-** **POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES DIRECTIVES.**

-  Pour le branchement à un bloc d'alimentation à l'extérieur des États-Unis, utiliser un adaptateur de fiche de branchement de la configuration appropriée pour la prise de courant.
-  L'unité d'alimentation (adaptateur CA) est conçue pour une orientation appropriée en position de montage verticale ou de plancher.

### BRANCHEMENT DE L'ADAPTATEUR C.A.

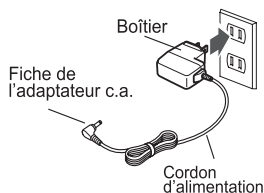

- Insérer la fiche mâle de l'adaptateur c.a. dans la prise de l'adaptateur c.a. du tensiomètre.
- Brancher l'adaptateur c.a. dans une prise de courant de 120 V c.a. (60 cycles).



### DÉBRANCHEMENT DE L'ADAPTATEUR C.A.

- Maintenir et tirer le boîtier pour retirer l'adaptateur c.a. de la prise de courant. Ne pas retirer en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Retirer la fiche mâle de l'adaptateur c.a. du tensiomètre.

### AVERTISSEMENT

-  Ne branchez ou ne débranchez pas le cordon d'alimentation dans une prise de courant lorsque vous avez les mains mouillées.
-  Ne pas surcharger les prises de courant. Branchez l'appareil dans une prise à la tension appropriée.

Fabriqué pour :  
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.  
53 Kunotsubo, Terado-cho,  
Muko, Kyoto, 617-0002 JAPON

Distribué par :  
OMRON HEALTHCARE, INC.  
1925 West Field Court,  
Lake Forest, IL 60045 É.-U.  
Fabriqué aux Philippines